

Matrace antidekubitní s kompresorem Med Aire Wave

Systém střídavého tlaku Drive Medical Med Aire Wave

je speciálně vyvinutý pro profylaxi dekubitů. Antidekubitní matrace nenahrazuje stávající matrace v posteli, ale může být použita pouze ve spojení se standardní matrací. Med Aire Wave je provozován pouze v režimu střídavého tlaku.




Základní provedení:

- dekubitní profylaxe při nízkém až středním riziku dekubitů.
- rozložení a uvolnění tlaku u imobilních a polo-mobilních pacientů
- dekubitní terapie včetně stupně 2 dle EPUAP.
- drive Medical Med Aire Wave má nosnost 30 - 140 kg.
- použití při zlomeninách (zejména zad, krční a bederní páteře)
- použití při neurologických poruchách, kde by neměl být používán dynamický střídavý tlak.
- všechny vzduchové komory jsou rovnoměrně rozděleny, zahrnut je cyklus změn v odvodu vzduchových komor který trvá 12 minut.
- matrace má devět buněk, proudících vzduchových komor, a je mikroperitizována na okraji, což zajišťuje aktivní větrání.
- rozměr matrace: 200x88x12 cm



Nastavení

Hmotnost uživatele

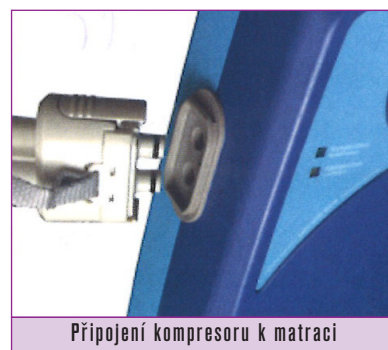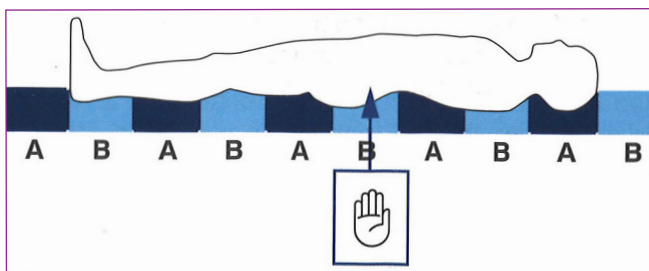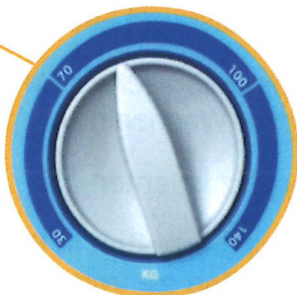

Připojení kompresoru k matraci



Vypínač se nachází bočně



Vzduchové komory

Objednávkový kód:

ZREDRM05000110AA

Matrace

ZREDRM05000120AA

Kompresor

Nehrazeno ZP

Nehrazeno ZP

